

YCU-500T

タブレット付きスマートカメラ

タブレット一体型のデジタルカメラ
タッチパネル方式で簡単操作! パソコン必要なし!



タッチパネルで
かんたん操作!

500万
画素

静止画
動画

計測


micro
HDMI

画面
サイズ
9.7インチ

Android


観察

9.7インチの高画質ディスプレイはタッチパネル式で直感的に操作することができます。
また、画面は垂直方向90度調節可能なので、観察しやすい角度で使用できます。

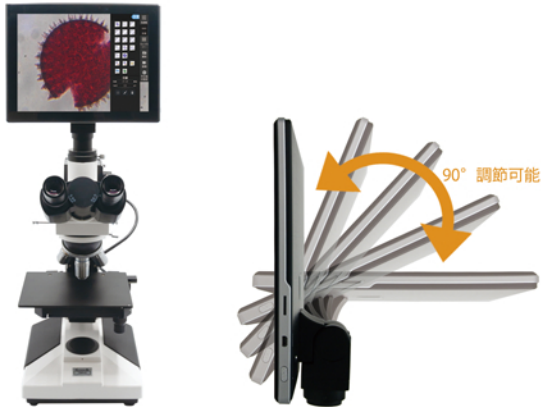

計測


直線、四角形、円、角度等、基本的な計測が可能。
計測データはエクセルの拡張子 (.xlsx) で保存でき、
画像付きデータのレポートがすぐに作成できます。

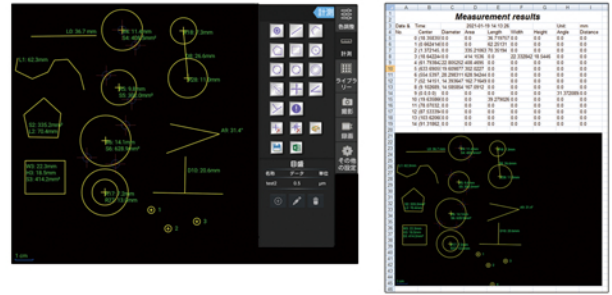

※ライブ映像での計測のみ加能で、静止画の計測はできません。


画像編集

撮影した静止画をグレースケール化したり、明るさコントラストを
変えることが可能。
また、明度の違いにより明度の低い部分を計測する機能も搭載。

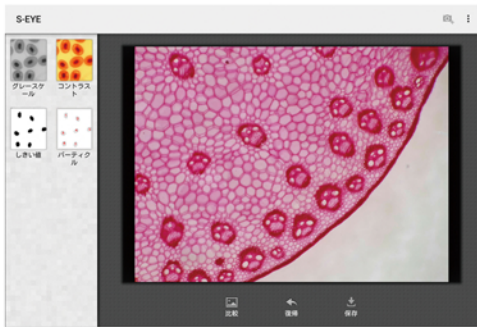

外部出力

microHDMIによりモニターに同時出力が可能。
USB、micro SDカード対応により、大容量のデータも
保存可能。
マウスを繋げば指よりもさらに繊細な計測が可能。

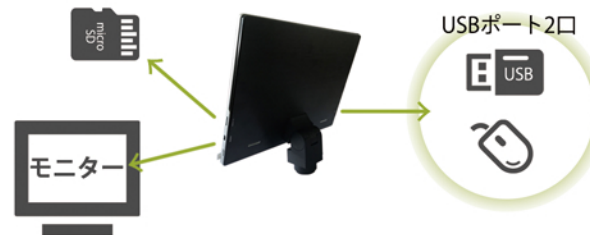


※搭載タブレットは顕微鏡での観察を目的にしているため、電波法認証を取得しておりません。
そのため、Wi-Fi・Bluetoothでの通信機能はお使いいただけません。

※USBケーブルによるパソコンへの同時出力は不可

仕様

センサーサイズ	1/2.5インチ (W5.7mm×H4.28mm, D7.13mm)
有効画素数	500万画素 (2592×1944)
プレビュー時の 解像度とフレームレート	1024×768 30fps 1600×1200 15fps 2048×1536 15fps
ピクセルサイズ	2.2×2.2μm
シャッター	電子ローリングシャッター
OS	Android 5.1
CPU	RK3288 Quad-core 1.8GHz
ディスプレイ	9.7インチ 2048×1536カラーLCD 5点マルチタッチスクリーン
RAM	2GB DDR3
ROM	8GB
外部端子	USB、microHDMI、TFメモリ (micro SD)、3.5オーディオ
電源	DC-12V/2A
その他	マイク・スピーカー搭載 機能：測長、静止画撮影 (Max1,600万枚)、動画撮影、画像編集
本体サイズ	238×51×206mm 0.6kg
付属品	ACアダプター、microSDカード
定価	175,000円 (税抜)
JAN	4562357222314

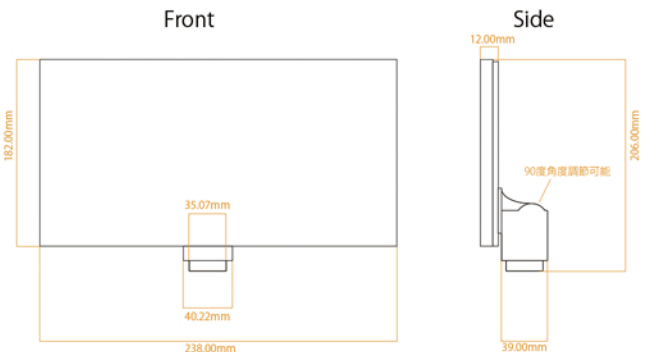

八洲光学工業株式会社
YASHIMA OPTICAL CO., LTD.

〒351-0113 埼玉県和光市中央1-7-14 根本ビル2階
TEL 048-424-8818 / FAX 048-424-8966
MAIL yashima@microscope.co.jp / URL http://www.microscope.co.jp

販売代理店